



Biatain

Абсорбирующая губчатая повязка обеспечивает мягкую и комфортную защиту

- Снижение мацерации
- Надежность и безопасность для пациента
- Адгезивные и неадгезивные формы
- Простота использования

Biatain



Biatain



Заживление раны и комфорт для пациента - это неотъемлемые составляющие профессионального лечения ран. Абсорбция избыточного экссудата и защита окolorаневой поверхности кожи имеют важное значение в процессе заживления ран.

Biatain повязка - это губчатая повязка на основе трехмерного полимерного материала, обеспечивающая комфортную защиту.

Biatain повязка применяется для лечения экссудующих ран и подходит для чувствительной кожи.

Biatain повязка представлена в адгезивном и неадгезивном исполнении в зависимости от специфических потребностей пациента.

Снижение мацерации

Biatain повязка демонстрирует превосходную способность впитывать и удерживать экссудат по сравнению с другими аналогичными повязками.

Прежде всего, **Biatain повязка** обладает высокой абсорбирующей способностью. Благодаря трехмерной структуре полимера, экссудат впитывается локально, снижая мацерацию.

Во-вторых, **Biatain повязка** обладает высокой способностью удерживать экссудат, гарантируя защиту от протекания.


Благодаря комбинации таких свойств, как высокая абсорбция и удержание экссудата, Вы можете применять **Biatain повязки** при компрессионной терапии.

Комфорт для пациента

Ассортимент **Biatain повязок** разработан для создания оптимального комфорта для пациента.

Biatain повязка мягкая, с гладкой поверхностью, которая обеспечивает комфорт для пациента. Благодаря уникальным способностям удержания экссудата, **Biatain повязка** обладает длительным временем использования, во время которого она сохраняет форму и не протекает.

Абсорбция и удержание 0,9% раствор NaCl

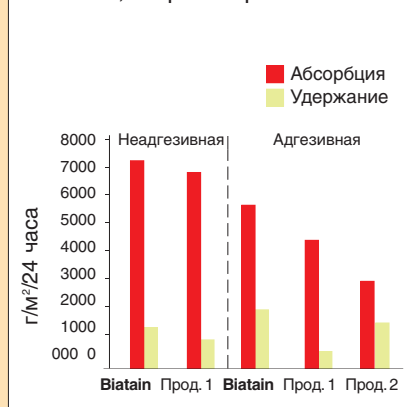

Гипоаллергенность

Biatain повязка подходит для всех типов кожи. Защищает рану и окolorаневую поверхность.

Biatain адгезивная повязка имеет не раздражающий кожу адгезив на гидроколлоидной основе.

Простота в использовании

Biatain повязку легко накладывать и удалять. При смене повязки в ране не остается никаких остатков. По состоянию наружной поверхности можно легко определить время смены повязки.



Инструкция по применению

- Очистите рану.
- Бережно высушите кожу.
- Наложите **Biatain повязку** таким образом, чтобы края повязки перекрывали края раны на 2 см.
- Смените **Biatain повязку** по клиническим показаниям. Повязку можно оставлять на ране до 7 дней в зависимости от количества экссудата и состояния повязки.

Ассортимент

Не-адгезивная	Номер по каталогу	Размер в см	Кол-во в упак.
	3410	10 x 10	10
	3413	15 x 15	5
	3416	20 x 20	5
	3465	Ø5	10
	3467	Ø8	10
Адгезивная			
	3420	12 x 12	10
	3421	15 x 15	10
	3423	18 x 18	5
	3485	23 x 23	5
	3488	19 x 20	5

Состав

Губчатый слой имеет трехмерную полимерную структуру: гидрофильный полиуретан, искусственный эмульгатор. Гидроколлоидный адгезив: натрий карбоксиметилцеллюлоза, искусственный эластомер, искусственный загуститель, пластификатор. Наружная пленка: полупроницаемый полиуретан.



Колопласт А/С
1-я Тверская-Ямская 23, стр. 1
Россия, 125047, Москва
Тел.: +7 495 937 53 90
Факс: +7 495 937 53 91
www.coloplast.com
info@coloplast.ru